

# Echo



## Echo Pro

Das Premium-Hörgerät zum Nulltarif\*

---

**Erfahren Sie auf 8 Seiten  
alles, was Sie zum Echo  
Pro wissen müssen.**

- 01 Überblick
- 02 Vergleich mit anderen Hörgeräten
- 03 Funktionsübersicht
- 04 Die App
- 05 Farben & Akku-Version
- 06 6 Jahre Nachsorge und Garantie
- 07 Häufige Fragen
- 08 Technische Daten

### Lauter / Leiser Tasten

Außerdem können Sie hiermit die Hörprogramme wechseln und Telefonanrufe annehmen, wenn das Hörgerät mit Ihrem Smartphone verbunden ist.

### High-Tech Chip


Im Echo Pro arbeitet einer der fortschrittlichsten Hörgeräte-Chips der Welt und sorgt für intelligente Technologie, die Ihre Umgebung erkennt und Störlärm besser filtert.

### Batteriefach

Entfällt bei Akku-Version.

### Lautsprecher (RIC)

Silikonaufsätze in verschiedenen Größen werden mitgeliefert.

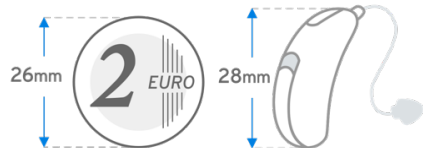

### 5-6 Tage Batterielaufzeit. Optional als Akku-Version.

Die handelsübliche 312er-Batterie im Echo Pro hält rund 5-6 Tage. In der Akku-Version hält eine Akkuladung rund 24 Stunden und ist in 3 Stunden aufgeladen. Der Aufpreis von 150€ pro Gerät ist dank der Ersparnis von rund 200€ Batteriekosten über 6 Jahre schnell wieder raus.



### Bluetooth & Musikstreaming.

Nutzen Sie Ihre Echo Pro als perfekt abgestimmte Kopfhörer.

### Extrem klein.

Das Echo Pro ist so klein, dass es hinter Ihrem Ohr kaum zu sehen ist.

## Vergleich mit anderen Hörgeräten

Echo kann über einen kostengünstigen Online-Vertrieb **Premium-Hörgeräte zum Nulltarif\*** anbieten. Hier sehen Sie einen Vergleich zwischen dem *Echo Pro*, dem *Phonak Vitus+* und dem *Widex Evoke Fusion 330*. Letztere sind typische Nulltarif- bzw. Premium-Hörgeräte beim herkömmlichen Akustiker (Stand 2022).

	Online ohne Termin	beim herkömmlichen Akustiker	
	Echo Pro	Nulltarif-Gerät Phonak Vitus+	Premium-Gerät Widex Evoke Fusion 330
<b>Eigenanteil</b> für beide Ohren	<b>Nulltarif *</b>	<b>Nulltarif *</b>	<b>ca. 2.980 €</b>
Frequenzkanäle	12	6	12
Wasser-/Staubdicht	✓	✓	✓
Störlärmunterdrückung	✓	✓	✓
Rückkopplungsunterdr.	✓	✓	✓
Windgeräuschunterdr.	✓	✗	✗
Impulsgeräuschunterdr.	✓	✗	✓
Raumhören	✓	✗	✓
Umgebungserkennung	✓	✗	✓
Dynamische Sprachanh.	✓	✗	✓
Bluetooth & Streaming	✓	✗	✓
6 Jahre Garantie	✓	✓	✓
6 Jahre Nachsorge	✓	✓	✓

### Allgemeine Funktionen:

- ✓ **Bluetooth, Musik hören, Telefonieren:** Verbinden Sie Ihre Hörgeräte mit anderen Bluetooth-Geräten (z.B. Smartphone oder Fernseher), um Ihre Hörgeräte als perfekt abgestimmte Kopfhörer zu nutzen. Beim Telefonieren wird das Mikrofon des Hörgerätes genutzt, sodass Ihr Smartphone in der Hosentasche bleiben kann.
- ✓ **Hörgerät steuern per Tasten oder App:** Lauter und leiser stellen, Hörprogramm wechseln oder Telefonanrufe annehmen und beenden. All das geht direkt am Hörgerät mit den beiden Multifunktionstasten. Alternativ können Sie Ihre Hörgeräte per Smartphone-App steuern.

### Funktionen für besseres Verstehen:

- ✓ **Raumhören:** Simuliert den „Pinna-Effekt“ des menschlichen Gehörs. So erkennen Sie, woher ein Geräusch kommt und wer Sie anspricht.
- ✓ **Intelligente Umgebungserkennung:** Die Klangeinstellungen passen sich in Echtzeit an Ihre Hörumgebung an. Für optimales Verstehen in jeder Situation.
- ✓ **Störlärmunterdrückung:** Hintergrundgeräusche werden reduziert, damit Sie das Gesprochene besser verstehen (z.B. im Restaurant).
- ✓ **Dynamische Sprachanhebung:** Kann Sprache von anderen Geräuschen unterscheiden und Sprache hervorheben.

### Funktionen für höheren Komfort und besseren Klang:



- ✓ **Natürliche Klangmischung:** Sorgt für eine natürliche Klangqualität in der Mischung aus unverstärkten und verstärkten Geräuschen.
- ✓ **Rückkopplungsunterdrückung:** Unterdrückt die lästigen Pfeifgeräusche, die man von Hörgeräten älterer Generationen kennt.
- ✓ **Impulsgeräuschunterdrückung:** Plötzlich auftretende laute Geräusche (z.B. das Knallen einer Tür) werden abgeschwächt.
- ✓ **Windgeräuschunterdrückung:** Unterdrückt das vom Wind verursachte Rauschen.

## Was kann die App?

### Erhalten Sie Anpassungen von unseren Hörakustikern.

Sollten Sie mit der Einstellung Ihrer Hörgeräte in gewissen Situationen nicht zufrieden sein, rufen Sie uns einfach an. Unsere Hörakustiker nehmen daraufhin Anpassungen vor und senden diese an die App. In der App können Sie die neuen Einstellungen mit einem Klick auf Ihre Hörgeräte übertragen (und auch mit einem Klick wieder rückgängig machen). So ist eine intensive audiologische Betreuung gewährleistet, denn bei uns brauchen Sie nicht auf einen Termin warten: Montags bis Freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr ist immer jemand für Sie erreichbar.

*ÜBERTRAGEN SIE ANPASSUNGEN VOM AKUSTIKER MIT EINEM KLICK AUF IHRE HÖRGERÄTE.*

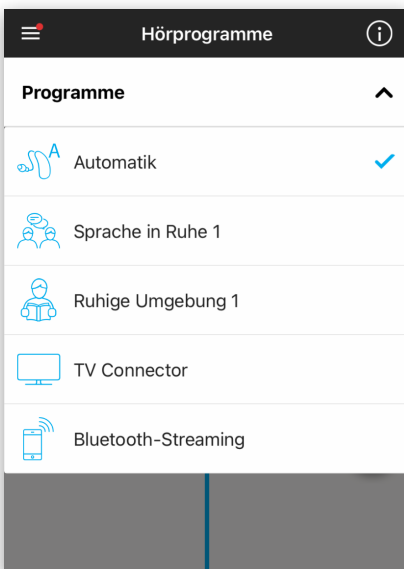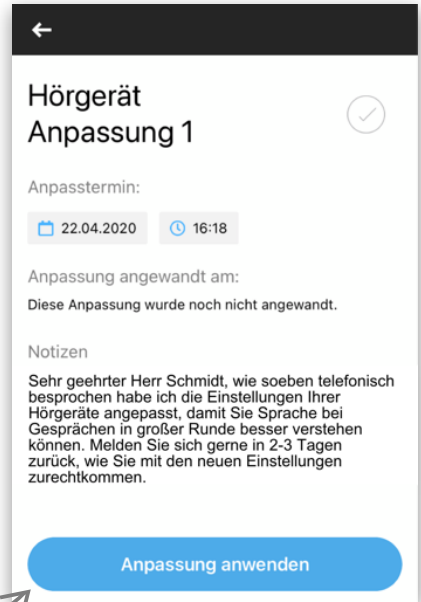

### Wechseln Sie das Hörprogramm und ändern Sie die Lautstärke.

Über die App können Sie in die verschiedenen Hörprogramme wechseln und die Lautstärke anpassen. Natürlich können Sie beides auch über die Knöpfe am Gerät steuern.

### Kann ich mit dem Echo Pro telefonieren?

Ja. Sie können Ihre Echo Pro per Bluetooth mit Ihrem Smartphone koppeln und über die Hörgeräte telefonieren. Ihr Smartphone kann dabei in der Hosentasche bleiben. Sie können über die Tasten am Hörgerät sogar direkt eingehende Anrufe annehmen.

### Ihre Wunschfarbe wählen Sie nach der Testphase.

Für die 30-tägige Testphase erhalten Sie zunächst Hörgeräte in anthrazit. Am Ende der Testphase erhalten Sie nagelneue Hörgeräte in der gewählten Farbe und schicken uns die anderen Geräte zurück (ein Rücksendeumschlag liegt im Paket - wir tragen alle Kosten für den Hin- und Rückversand).



### Optional als Akku-Version inkl. Ladebox

**Aufpreis: 150 € pro Ohr**

Der Aufpreis von 150€ pro Gerät ist dank der Ersparnis von rund 200€ Batteriekosten über 6 Jahre schnell wieder raus. Die Ladebox dient übrigens gleichzeitig als Trockenbox, die Ihre Hörgeräte über Nacht entfeuchtet, um die technischen Komponenten zu schützen.



**3 Stunden**  
Aufladen



**24 Stunden**  
Akkulaufzeit



### Akustiker-Betreuung von zu Hause aus. 6 Jahre kostenlos.

Die Hörgeräte kommen fertig eingestellt zu Ihnen. Es gehört jedoch zu jeder guten Anpassung, die Grundeinstellungen nach einiger Zeit auf Basis Ihrer persönlichen Vorlieben nachjustieren. Bei uns müssen Sie dazu nicht mal Ihr Haus verlassen. Unsere Akustiker können aus der Ferne auf Ihre Hörgeräte zugreifen. Neue Einstellungen werden auf Ihre App gesendet und können mit einem Klick aktiviert werden.

### Ist die Anpassung genau so gut wie beim herkömmlichen Akustiker?

Ja. Unser Team aus ausgebildeten Hörakustikern nutzt das gleiche Anpassverfahren wie der herkömmliche Akustiker. Mit dieser Grundeinstellung sind die Hörgeräte sofort einsatzbereit. Anschließende Feinanpassungen erfolgen von zu Hause aus. Das ist nicht nur bequem, sondern auch für Ihren Hörerfolg entscheidend. So testen Sie neue Einstellungen nicht in einem stillen Akustiker-Geschäft (wo sich jede Einstellung gut anhört), sondern in Ihrer echten Umgebung.

### So funktionieren die Feinanpassungen von zu Hause aus:

1

Sie rufen uns an und sprechen mit unseren ausgebildeten Hörakustikern.

2

Unser Akustiker sendet ein Update auf Ihre App.

3

Mit einem Klick in der App übertragen Sie die neuen Einstellungen auf Ihre Geräte.

### Kostenlose Reparaturen und Ersatzgeräte.

Sie erhalten 6 Jahre Garantie auf die Hörgeräte. Reparaturen (ohne Eigenverschulden) sind in diesem Zeitraum kostenlos. Sollte mal ein Defekt vorliegen, senden wir Ihnen umgehend Ersatzgeräte zu. Im gleichen Paket erhalten Sie einen Portoaufkleber, sodass Sie Ihre Geräte kostenlos zur Reparatur an uns schicken können. Wir tragen dabei alle Kosten - auch für den Hin- und Rückversand.

## Häufige Fragen zum Echo Pro

### **Hat das Echo Pro ein spezielles Hörprogramm für Musik?**

Ja, für Musikliebhaber können wir ein Musik-Programm einrichten. Falls gewünscht, informieren Sie uns dazu bitte per E-Mail ([kontakt@dein-echo.de](mailto:kontakt@dein-echo.de)) nach Ihrer Bestellung.

### **Ist das Echo Pro kompatibel mit iPhone- und Android-Geräten?**

Ja, grundsätzlich ist das Echo Pro mit allen aktuellen iPhone und Android-Geräten kompatibel. Wenn Sie sich unsicher sind, fragen Sie bitte vorher bei unserem Kundenservice unter Angabe Ihres Smartphone-Modells. Gerne prüfen wir für Sie, ob Ihr Smartphone kompatibel ist. Speziell Smartphones von „Huawei“ sorgen im Moment für Probleme mit Hörgeräten.

### **Von welchem Hersteller kommt das Echo Pro?**

Das Echo Pro wird vom weltweiten Marktführer Sonova hergestellt, der für die Marken Phonak, Unitron und Hansaton produziert. Das Echo Pro entspricht dem Unitron Moxi. Technische Grundlage ist eine der fortschrittlichsten Hörgeräte-Technologien der Welt: Die neue „Blu“-Plattform.

### **Was passiert, wenn ein Hörgerät kaputt geht?**

Sollte Ihr Hörgerät im Laufe der 6 Jahre einen Defekt aufweisen, erhalten Sie umgehend Ersatzgeräte per Post. Dem Paket liegt eine Portomarke bei, sodass Sie Ihre Hörgeräte kostenlos einschicken können. Wir tragen alle Kosten für Hin- und Rückversand. Reparaturen (ohne Eigenverschulden) sind für 6 Jahre kostenlos.

### **Wie ist der Ablauf mit der Krankenkasse?**

Da wir ein Schweizer Unternehmen sind, ist der Ablauf mit der Krankenkasse etwas anders, als beim herkömmlichen Akustiker. Der herkömmliche Akustiker erhält den Krankenkassenzuschuss direkt von Ihrer Krankenkasse. Wenn Sie bei uns bestellen, wird der Zuschuss von der Krankenkasse an Sie bezahlt und Sie zahlen diesen wiederum an uns.


### **Muss ich das Geld vorstrecken, bis ich die Kostenersatzung der Krankenkasse erhalte?**

In der Regel nicht, denn Sie können **auf Rechnung** bestellen. Sie müssen dann erst nach der 30-tägigen Testphase bezahlen. Wichtig ist, dass Sie uns schnellstmöglich Bescheid geben, sobald Sie wissen, dass Sie Ihre Hörgeräte behalten möchten. Wir senden Ihnen dann alle erforderlichen Unterlagen für die Kostenerstattung der Krankenkasse zu. Nach Einreichen aller Unterlagen benötigt die Krankenkasse ca. 2 Wochen für die Auszahlung.






**Die Angaben auf dieser Seite sind für Profis.** Also keine Sorge, falls Sie damit nichts anfangen können. Sobald Sie uns nach der Bestellung Ihr Audiogramm zugesandt haben, prüfen unsere Hörakustiker, ob das Echo Pro für Ihren Hörverlust geeignet ist.

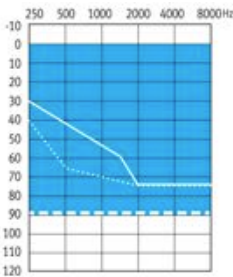

M Receiver

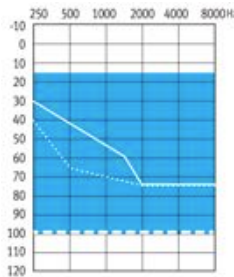

P Receiver

— Open Dome/Cap Dome  
 ..... Vented Dome  
 - - - Power Dome oder Hohlotoplastik

Standard S      Moderat M      Power P      Ultra Power UP

### ANSI 3.22 2014/IEC 60118-0: 2015 2cc-Kuppler Technische Daten

	OSPL <sub>go</sub>				
	Höchstwert (dB SPL)	111	114	122	130
	HFA - OSPL <sub>go</sub> (dB SPL)	106	111	120	124
	Full on Gain (Eingang 50 dB SPL)				
	Höchstwert (dB)	46	50	58	67
	HFA - FOG (dB)	39	45	55	62
	Bezugsprüfeinstellungen (RTS)				
	Frequenzbereich (Hz)	<100 - 8000	<100 - 8000	<100 - 6300	<100 - 6000
	Bezugsprüfverstärkung (dB)	29	34	43	47
	Durchschnittliche Batterielebensdauer (h)	2.2	2.1	2.2	2.1
	Äquivalentes Eigenrauschen bei RTS (dB SPL)	19	19	19	19
	Klirrfaktor bei 500 Hz/800 Hz/1600 Hz/3200 Hz (%)	1.5/2.0/2.0/1.0	1.5/2.0/2.0/1.0	1.0/1.5/1.0/1.0	1.5/1.5/1.0/1.0
Elektromagnetische Kompatibilität					
EMV-Immunität nach ANSI C63.19-2011 EMC, Omni		M <sub>4</sub>	M <sub>4</sub>	M <sub>4</sub>	M <sub>4</sub>

### Legende

- S Receiver
- M Receiver
- P Receiver
- UP Receiver

### Testbedingungen

Batteriegröße: 312; Spannung: 1.3 V  
 Die Messungen wurden mit einer geschlossenen Konfiguration mit einem HA-1 Kuppler (ANSI-3.7-1995) durchgeführt.  
 Hörsystem im Untron TrueFit Testmodus. LLE (low level expansion) wird bei ca. 35 dB SPL angewandt.  
 Domes dürfen niemals bei Hörsystemträgern mit perforiertem Trommelfell, offenen Kavitäten des Mittelohrs oder chirurgisch veränderten Gehörgängen verwendet werden. Für solche Fälle empfehlen wir, ein individuell gefertigtes Ohrpassstück zu verwenden.  
 Wir behalten uns vor, die technischen Daten im Zuge der Entwicklung ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Bestellen Sie jetzt Ihre Echo Pro  
und starten Sie das 30-tägige Probehören.**



Online bestellen auf:  
**[www.dein-echo.de](http://www.dein-echo.de)**

**Echo**

**Haben Sie noch Fragen?** Lassen Sie sich von unseren  
ausgebildeten Hörakustikern kostenlos beraten:



**05971 9699 948**

Mo bis Fr von 08:00 bis 18:00 Uhr



**[kontakt@dein-echo.de](mailto:kontakt@dein-echo.de)**

Sternchen beim Nulltarif: \* Für Mitglieder gesetzlicher Krankenkassen mit Leistungsanspruch und ohrenärztlicher Verordnung erstattet die Krankenkasse die Kosten der angebotenen Hörgeräte abzüglich 10 € gesetzlicher Zuzahlung pro Ohr sowie Verwaltungskosten in Höhe von ca. 30 € bis 70 €. Der genaue Abzug für Verwaltungskosten hängt von Ihrer Krankenkasse ab.

Mehr infos auf [www.dein-echo.de/krankenkasse](http://www.dein-echo.de/krankenkasse)

Hearing Innovations AG · Binnerstraße 7, 4123 Allschwil, Schweiz · [www.dein-echo.de](http://www.dein-echo.de)

Widerrufsbelehrung, AGB und Datenschutzhinweise finden Sie auf [www.dein-echo.de](http://www.dein-echo.de)